

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 呼吸ガス混合器 36327009

PARI ボアテックス

【警告】

〈使用方法〉

薬剤の種類、用法・用量については医師の指示に従うこと。

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉


本品は同一患者使用のため、他の患者に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

本品は、ボアテックス本体、マスクから構成される（マスクが付属しない場合もある）。

代表的写真

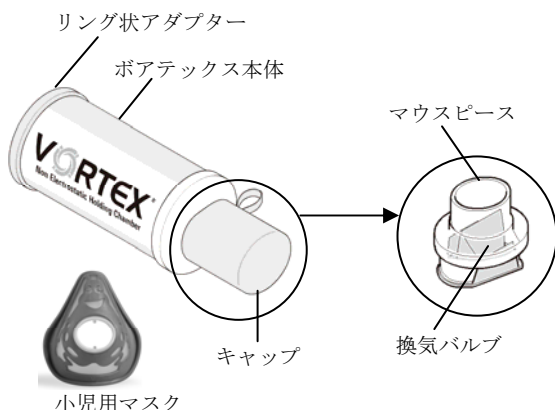

2. 原材料

マウスピース：ポリカーボネート

マスク：TPE

3. 原理

特殊な溝がついたリング状アダプターにより、患者の吸気によってスプレー室内に渦上の気流を発生させ、効率よく吸入することができる。

【使用目的又は効果】

液体の医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる機器である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 定量噴霧吸入器（MDI）をよく振ってから MDI のキャップを外す。
- 2) MDI のマウスピースをリング状アダプターに差し込む。
- 3) ボアテックス本体のキャップを軽く回して外す。
- 4) ボアテックス本体のマウスピースを口にくわえる。マスクを使用する場合は、鼻と口を覆うようにマスクを顔に密着させる。

- 5) MDI の取扱説明書に従ってポンペを押してボアテックス本体内に薬剤を 1 回噴霧する。
- 6) ゆっくりと息を吸い込み、数秒間息を止めてゆっくりと息を吐き出す。

2. 使用上の注意

- 1) 初めてボアテックスを使用する場合は、必ず洗浄すること。また、必要に応じて消毒・滅菌すること。
- 2) 換気バルブの開閉により吸入できているかを確認すること。
- 3) マウスピースの換気バルブが正しい向きになっているかを確認すること。

【使用上の注意】

その他の注意

感染リスクの高い疾患による特殊な衛生上の配慮が必要な場合は、医師等の指示に従い、適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

使用期間

使用開始から 1 年又は 60 回の洗浄又は 30 回の消毒・滅菌
〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒・滅菌方法

- 1) 使用後、リング状アダプターをボアテックス本体から外し、中性洗剤と約 40℃ の温水で洗浄し、清潔な水で洗剤をじゅうぶん洗い流すこと。
- 2) 消毒・滅菌する場合は、すべての部品を分解し、以下の方法のうち適切な方法で行うこと。
 - ・煮沸消毒：15 分間
 - ・蒸気消毒（例：電気式哺乳瓶蒸気消毒器）
 - ・ウォッシュャーディスインフェクター等
 - ・オートクレープ滅菌（マスク及びキャップは除く）：
121℃ 20 分又は 134℃ 3 分

2. 点検

- 1) 使用前に各接続部がしっかりと接続されているか確認すること。
- 2) 使用前に、定期的に本品の各部品に損傷（破損、変形、変色）等がないか確認すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：パリテック社 ドイツ

PARItec GmbH Production und Logistik